



SG DEVELOPMENT & DISTRIBUTION

Votre partenaire en Solutions Médico-Esthétiques.
Développez votre expertise

BROCHURE MESOJET

Hy-po - RF - Combo - Concierge



HYDROPORATION

RADIOFRÉQUENCE



MESOJET® est une gamme de dispositifs fabriqués en Europe permettant de délivrer des soins de la peau d'une qualité exceptionnelle et développée pour répondre à la demande grandissante des traitements anti-âge dans le domaine esthétique.

Découvrez aujourd'hui les meilleures technologies de supplémentation cutanée et de radiofréquence réunies dans cette gamme de dispositifs.



MESOJET® Hy-Po



MESOJET® RF



MESOJET® Combo



MESOJET® Concierge

2 TECHNOLOGIES • 3 DISPOSITIFS



MESOJET® Hy-Po

Grâce à sa technologie d'hydroporation ce dispositif permet la pratique d'un soin complet de réjuvenation cutanée par exfoliation et supplémentation transcutanée de principes actifs.

Avec sa pièce à main dernière génération et une large gamme de principes actifs, vous obtiendrez des résultats anti-âge visibles ainsi qu'une amélioration de la texture et de la qualité de la peau.



MESOJET® RF

Grâce à sa technologie de Radiofréquence monopolaire & bipolaire, ce dispositif permet la pratique d'un soin de raffermisssement cutané pour le visage et le corps.

Avec ses 2 pièces à main en céramique et ses plaques pour le corps vous obtiendrez des résultats sur les peaux relâchées et même la cellulite.

Au travers d'un soin des plus agréables (comparable à un massage aux pierres chaudes) vous obtiendrez des résultats visibles sur la remise en tension cutanée et la texture de la peau.



MESOJET® COMBO

Grâce à la combinaison des technologies de radiofréquence et d'hydroporation, ce dispositif est le partenaire idéal pour optimiser vos soins anti-âge.

Plus besoin de multiplier les dispositifs, optimisez votre espace de soin.

Grâce au MESOJET® Combo et à ses protocoles combinés, vous pouvez obtenir des résultats 30% plus rapides que lors d'une séance de MESOJET® Hy-Po seule, et accroître de 50% leur qualité et durabilité à long terme.




L'HYDROPORATION

Supplémentation cutanée sans aiguille

À l'aide d'une pièce à main brevetée, le dispositif **MESOJET® Hy-Po** va propulser à une vitesse supersonique (>200 m/s), un mélange d'air et de solution active sous la forme d'un jet de gouttelettes microscopiques et ce, sans AUCUN CONTACT avec la peau.


Une séance **MESOJET® Hy-Po** consiste en un traitement complet de la zone à traiter (visage, décolleté, corps). En fonction de l'inclinaison de la pièce à main et de sa distance à la peau, on pourra :

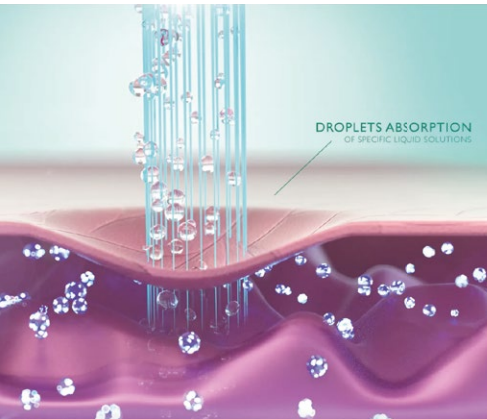

- Dans un 1^{er} temps, procéder à un **drainage lymphatique** pour relancer la circulation
- Puis dans un 2nd temps **exfolier** les couches superficielles de la peau et éliminer les cellules mortes : **Hydro-dermabrasion**
- Et dans un 3^{eme} temps, engendrer une pression statique locale sur la peau, où le principe actif pénétrera alors jusqu'à plusieurs millimètres jusqu'au derme : c'est la **supplémentation cutanée** ou **hydroporation**.

Ce processus, appelé "Barophorèse" est le résultat de la variation de pression exercée sur la peau.

Il garantit un accès sans aiguille aux couches profondes de la peau et facilite l'apport de nutriments tels que l'acide hyaluronique, qui peut atteindre les tissus conjonctifs, ou les vitamines A, B, C et E importantes pour le bon fonctionnement des cellules.

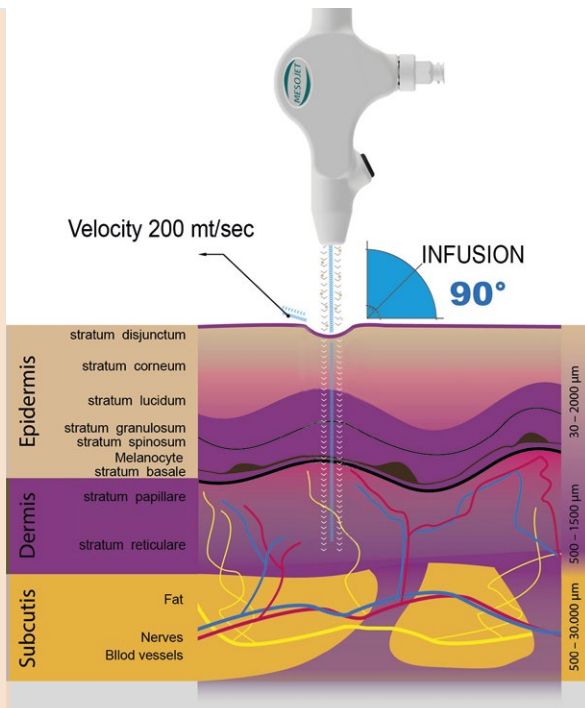

La "Barophorèse"

Le jet supersonique va générer un flux sous haute pression au point de contact avec la peau créant l'ouverture de micro-canaux dans l'épiderme.

La différence de pression entre la surface et les tissus inférieurs, va provoquer une **pénétration profonde et une diffusion transdermique** des substances biologiques.

L'allègement de la pression va refermer les micro-canaux et maintenir les principes actifs durablement dans les tissus, pour des **effets physiologiques** à long terme.

HYDRO-DERMABRASION

PEELING CHIMIQUE

INFUSION TRANSDERMIQUE

BIO-REJUVENATION



UNE LARGE GAMME DE PRINCIPES ACTIFS

Adaptée à la diversité cutanée

En fonction du protocole et/ou du résultat souhaité, différentes formules de principes actifs sont disponibles.

L'une des caractéristiques principales du MESOJET® Hy-Po est la capacité de transmettre en profondeur des substances utiles pour le rajeunissement de la peau. Ces formules sont enrichies en nutriments, vitamines et minéraux indispensables à l'élasticité, l'éclat, le rajeunissement et la beauté de la peau.

Le praticien dispose de produits de haute concentration, expressément conçus pour être administrés par la pièce à main PREMIUM du MESOJET® Hy-Po. Enrichies avec les plus puissants actifs anti-âge du marché, les solutions 'Jet Solution' garantissent des résultats ciblés selon les protocoles de traitement.

Les consommables qui vous sont proposés vous permettent d'effectuer tous les protocoles MESOJET® Hy-Po : Anti-âge visage et corps, acné, couperose, dépigmentation et soin du cuir chevelu.



Retrouvez les produits sur la plate-forme produits
<https://distribution-sg.ch>

UNE PIÈCE À MAIN

Adaptée aux protocoles de soins


LA PIÈCE À MAIN PREMIUM

Permet d'effectuer tous les soins :


- Meilleure micronisation : particules plus fines et moins d'air pour une pression identique et des meilleurs résultats
- Jet plus homogène,
- Puissance réglable,
- Ne se bouche pas et ne diminue pas en efficacité au fil des soins
- Pas d'éléments métalliques contondants = pas de risque de blessure
- Nettoyage rapide et facile de la pièce à main
- Plus de gaspillage de plastique !




DÉBIT RÉGLABLE MANUELLEMENT

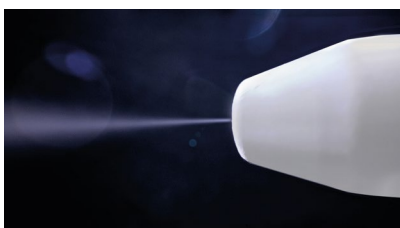

FIN

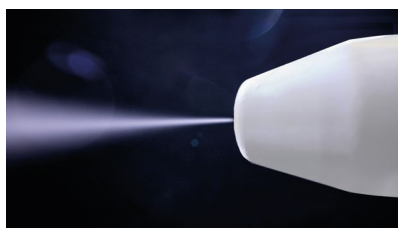

MOYEN

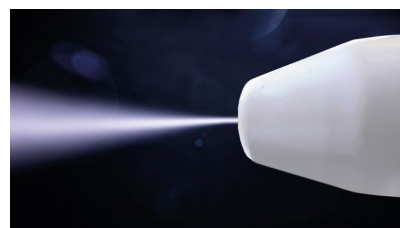

FORT

DES PROTOCOLES DE SOINS en plusieurs étapes



ETAPE
01

DRAINAGE LYMPHATIQUE

Un massage agréable et relaxant utile pour détoxifier la peau et stimuler la microcirculation.

ETAPE
02

HYDRO-DERMABRASION

Elimination des cellules mortes prépare la peau à recevoir les nutriments lors de la phase d'hydroporation.

ETAPE
03

HYDROPORATION

Permet une diffusion efficace et profonde des ingrédients actifs dans la peau.

ETAPE
04

BOOSTER INFUSION

Etape facultative peut être incluse pour améliorer et prolonger le résultat du traitement.



LA RADIOFRÉQUENCE au service de l'anti-âge

La radiofréquence du **MESOJET® RF** a été développée avec des réglages spécifiques qui génèrent un échauffement contrôlé de la bicouche lipidique permettant à la barrière cutanée de devenir plus perméable aux substances lipolytiques et hydrophiles.

Traitée de cette manière, la peau est capable de beaucoup mieux absorber les principes actifs que l'opérateur choisit de délivrer.



LES INDICATIONS

1 Le dispositif **MESOJET® RF** procure un soin agréable et indolore délivrant une chaleur douce grâce à sa radiofréquence. Vous pourrez ainsi traiter :

- Les rides et ridules (anti-aging)
- Les vergetures et cicatrices
- L'élimination de la peau d'orange
- **Le raffermissment de la peau**
- L'amélioration de la texture cutanée


2 Utilisé sur le visage, **MESOJET® RF** permet d'en redessiner les contours et d'améliorer la texture cutanée. La chaleur induite par l'onde génère un **effet tenseur** instantané et durable, redonnant à la peau un aspect visiblement plus jeune.

3 Avec ses 91 modes de traitements prédéfinis pour le visage et le corps et ses 2 pièces à main en céramique, traitez un maximum d'indications pour des résultats visibles et durables.



LES PIÈCES À MAIN


Le dispositif **MESOJET® RF** dispose de deux pièces à main en céramique. Ergonomiques, légères et faciles d'utilisation, elles vous permettent de traiter le visage ou le corps avec une conductivité optimale et de réaliser des séances à la fois sûres, confortables et efficaces.

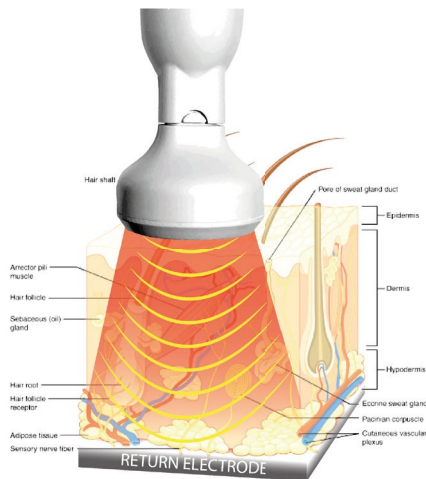

MONOPOLAIRE

pour le traitement du **CORPS**
(Puissance max. 1Mhz)

- Relâchement cutané
- Cellulite et amas adipeux
- Vergetures et cicatrices

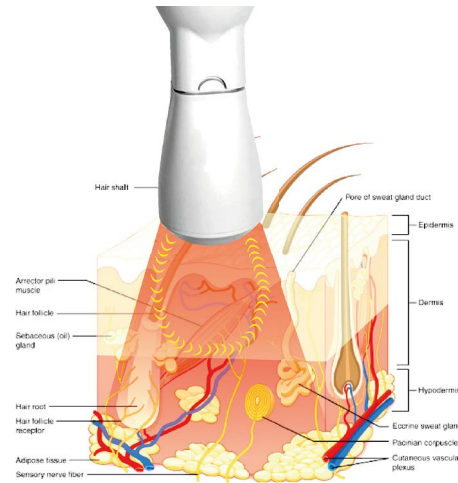

BIPOLAIRE

pour le traitement du **VISAGE**
(Puissance max. 1Mhz)

- Relâchement cutané
- Raffermissment de la peau
- Anti-rides
- Amélioration de la texture de la peau



EMBOUT SUR OPTION

pour le traitement des petites zones délicates

PRECIOUS WAVE® le Gel Conducteur RF



L'INDISPENSABLE POUR UN TRAITEMENT MESOJET® RÉUSSI : **USI**

PRECIOUS WAVE® est un gel crème créé spécifiquement pour :

- Permettre un mouvement confortable de la pièce à main sur la peau,
- Prodiguer un enveloppement agréable et fournir une expérience unique de massage pour le client grâce à sa texture particulière .
- Obtenir une peau tonique grâce à des principes actifs, ajoutés à la formule, qui ciblent le renouvellement cellulaire et la stimulation des fibroblastes.

C'est une crème nourrissante et hydratante, laissant un fini velours sur la peau.

Sa texture particulière, qui après quelques minutes, avec la chaleur, se transforme en gel, permet un temps de massage continu avec la pièce à main, sans avoir besoin d'ajouter du produit pendant la séance.



PRECIOUSWAVE
CONDUCTIVE GEL CREAM



PRECIOUS WAVE® contient deux INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Une combinaison de glycogène et d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Ces deux actifs agissent de manière synergique pour tonifier et redensifier la peau.
- Un extrait de plancton tonifiant.



LA SUPÉRIORITÉ DU COMBINÉ Hy-Po + RF

Grâce à de nombreuses années en tant que producteur de SÉRUMS anti-âge et fonctionnels, et à une expérience tout aussi longue sur les systèmes d'hydroporation, le fabricant Italien du MESOJET® a pu développer des protocoles spécifiques pour combiner les traitements de RADIOFREQUENCE et d'HYDROPORATION d'une efficacité prouvée.

Ainsi, 26 modes spécifiques sur les 91 prédéfinis ciblant les protocoles combinés radiofréquence + hydroporation sont inclus dans le logiciel MESOJET®.

La combinaison de RF et d'hydroporation est un protocole scientifiquement fondé qui cible des résultats de rajeunissement profonds, efficaces et durables.

La barrière cutanée est renouvelée et réparée, les rides sont atténuées, l'âge et les taches pigmentaires sont beaucoup moins visibles. La peau est boostée, jusqu'à la couche profonde, avec des peptides, des antioxydants et des actifs anti-âge efficaces. **PRECIOUS WAVE® contient deux INGRÉDIENTS ACTIFS:**

LES RÉSULTATS DES PROTOCOLES COMBINÉS SONT **30% PLUS RAPIDES** QUE
LORS D'UNE SÉANCE DE JET SEULE, ET PERMETTENT D'ACCROÎTRE DE **50%**
LEUR QUALITÉ ET DURABILITÉ À LONG TERME .

La combinaison des deux traitements améliore également la texture de la peau, car grâce au stimulus thermique des ondes RF, des protéines de choc thermique sont synthétisées entraînant une meilleure régénération de la peau.



L'élasticité et le tonus de la peau dépendent beaucoup du niveau d'eau dans l'épiderme . C'est la raison pour laquelle les AQUAPORINES - des canaux d'eau (pores) qui peuvent être régulés de manière externe pour contrôler le débit d'eau vers et depuis la cellule - jouent un rôle si important.

Les ondes MESOJET® induisent des courants dans les molécules d'eau de la peau, relâchant ainsi les liaisons Hydrogène. Cela entraîne l'agrandissement et la multiplication des aquaporines.

Grâce à ce processus la peau sera plus perméable et pourra être ré-hydratée en profondeur.

Vous pourrez ainsi procéder à l'infusion par hydroporation directement avec le même dispositif - un vrai gain de temps pour des résultats incomparables!





LES RÉSULTATS

Hy-Po

Avant



Après 1 séance Jet protocole Lèvres

LES RÉSULTATS

RF



Avant

Après 2 séances RF
'Traitement CELLULITE '

LES RÉSULTATS

Hy-Po + RF



Avant



Après 1 seule séance protocole combiné
(Anti-Aging 3 + JET for Skin Laxity RF)



SANS DOULEUR

MESOJET® est totalement indolore, sans aiguille ni injection intradermique. Les micro-jets non-invasifs pénètrent profondément dans la peau et la chaleur induite par la pièce à main céramique offre une expérience totalement confortable, relaxante et agréable.



PAS DE TEMPS D'ÉVICTION

L'administration transdermique 100% non-invasive signifie qu'il n'y a pas de tissu cicatriciel ni de temps d'éviction sociale. Le client quitte le traitement satisfait dans le plus grand confort et peut immédiatement reprendre ses activités quotidiennes.



RÉSULTATS VISIBLES RAPIDEMENT

L'administration instantanée en profondeur dans la peau de principes actifs puissants grâce à la pièce à main, ou l'induction de chaleur émise par la Radiofréquence MESOJET® permet d'obtenir des résultats rapides qui peuvent être observés immédiatement dès la fin de la 1^{ère} séance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CE 1370

	MESOJET®RF	MESOJET® Hy-Po	MESOJET® Combo
Puissance RF	Max. 1 MHz / 140 W	-	Max. 1 MHz / 140 W
Puissance Jet	-	7.0 bars	7.0 bars
Pièces à main	3 pièces à main en céramique : 1 visage Bipolaire - diam. 2,9 cm 1 corps Monopolaire - diam. 5 cm 1 embout petites zones - diam. 2 cm + 1 plaque de retour corps	1 PAM Premium Retrouvez les produits sur la plate-forme produits https://distribution-sg.ch	Hy-Po : 1 PAM Premium RF : 3 pièces à main en céramique 1 visage Bipolaire, 1 corps Monopolaire, 1 embout petites zones + 1 plaque de retour corps
écran	10 pouces, tactile couleur	10 pouces, tactile couleur	10 pouces, tactile couleur
Alimentation	230V : 50-60Hz	230V : 50-60Hz	230V : 50-60Hz
Dimensions	65 x 35 x 102 cm	65 x 35 x 102 cm	65 x 35 x 102 cm
Poids	40 kg	43 kg	45 kg
Consommation	550 W	550 W	550 W



À RETENIR

- ▶ Une large gamme de principes actifs
- ▶ Résultats Instantanés
- ▶ Indolore et sans éviction sans aiguille
- ▶ En toute saison pour hommes & femmes
- ▶ 2 pièces à main céramique visage et corps
- ▶ 91 protocoles enregistrés
- ▶ 26 protocoles combinés
- ▶ 1 Gel crème de contact PreciousWave®